




N3C-R

USD89

Product Images

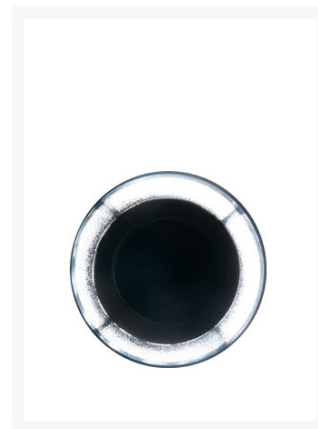

Descripción

En la mayoría de observaciones macro, un anillo de luz puede ayudar a revelar más detalles al generar una iluminación sin sombras. Trabajando a la perfección con la serie Edge Dino-Lite, la tapa frontal N3C-R es una solución única y más simple diseñada para proporcionar iluminación de anillo para un microscopio. El N3C-R de 6.5cm (2.5 pulgadas) de diámetro utiliza completamente los LED incorporados del Dino-Lite al redirigirlo para formar un anillo de luz enfocado, difuso y uniforme. Para el modelo de polarizador como AM4115ZT, el polarizador aún se puede usar para suprimir el deslumbramiento o reflejo no deseado cuando se usa con N3C-R. Sin el desorden de montar y encender un anillo de luz externo, por lo que no se agregó calor y peso notable, el N3C-R con clip proporciona una iluminación alternativa de manera económica y agrega más flexibilidad a las aplicaciones de Dino-Lite. Nota: El N3C-R tiene la mejor distancia de trabajo en el rango de aproximadamente 2 a 15cm. Puede que no sea adecuado para operaciones a distancias de

trabajo cortas y no es compatible con modelos de gran aumento como AM4515T5 o AM4515T8.

Additional Information

Periodo de Garantía	1 año
Fabricado en	Taiwan
Servicio y Mantenimiento	EE.UU. (www.dinolite.us) Inglés y Español
Aprobación Regulatoria	ROHS
Dimensiones	15.5 mm (H) x 65 mm (D) / 0.6" x 2.5"
Peso	8g
Paquete Incluye	Lens Cap Adapter
Dimensiones del Paquete	8.2 cm (L) x 8.3 cm (W) x 2 cm (H)
Peso de Paquete	1lb

